Anleitungen zur Probenahme - **ALPAKA**

generatio
Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com





- ✓ **Haarwurzeln**
- ✓ EDTA-Blutprobe (nur vet. Personal)

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

Haarwurzeln

generatio
Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. *Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.*
2. *Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.*

Umschlag mit Haarproben vorbereiten

Papierumschlag ihrer Wahl verwenden

Papierumschlag außen beschriften

Benötigte Angaben zur Haarprobe:
- ☐ Tiername
- ☐ Tel. für Rückfragen
- ☐ Auftragsnummer der Onlinebestellung



Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

Haarwurzeln

generatio
Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. *Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.*
2. *Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.*

Probenahme

- Zwei fingerdicke Haarbündel mit Haarwurzeln aus dem Schwanzbereich gewinnen
- Haarbündel mit Klebestreifen zusammenhalten

Videoanleitung

Hinweise

👉 **Anforderungen an die Haare vor Entnahme:**
- Trocken
- Frei von Pflegeprodukten

Fertiger Probenumschlag mit Alpakahaarwurzeln

Papierumschlag außen beschriftet:
- ✓ Tiername
- ✓ Tel. für Rückfragen
- ✓ Auftragsnummer der Onlinebestellung



Im Umschlag:
- ✓ zwei „fingerdicke“ Haarbündel
- ✓ mit Klebestreifen gebündelte Haare mit Haarwurzeln



Bei Haarproben von mehreren Tieren - Haarproben jeweils in einzelnen Briefumschlägen verpacken!

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

Haarwurzeln

generatio
Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

Wichtige Hinweise:

1. *Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.*
2. *Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.*

Probenversand vorbereiten

Drucker verfügbar?

Nein → **Online Bestellung aufgeben!**

Und

Formloses Begleitschreiben erstellen:

- ☐ Tiername
- ☐ Tel. für Rückfragen
- ☐ Auftragsnummer der Onlinebestellung

Ja

Online-Bestellung?

ATC-generiertes Einsendeformular ausdrucken.

Ja

Ohne Onlineauftrag?

Zutreffendes Blankoformular ausdrucken und ausfüllen.

Versandverpackung: Papierumschlag

- ✓ Begleitschreiben/ Formular
- ✓ Haarproben in beschriftetem Papierumschlag



☑

Versandanleitung

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

generatio
Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com


EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:

1. *Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.*
2. *Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.*

Vorbereitungen

☐ **Röhrchen für EDTA-Blut beschriften**

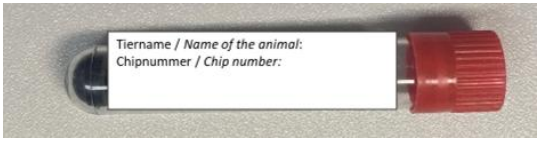

Probenahme

- 2- 3 ml Blut entnehmen.
- Blut sorgfältig mit EDTA durch mehrmaliges invertieren mischen.
- EDTA-Blutröhrchen und Decke **bitte nicht** zusätzlich mit Parafilm verschließen.
- 👉 Probe vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- 👉 Bei Versand später als 2 Tagen: Probenröhrchen im Kühlschrank zwischenlagern.

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax

Anleitungen zur Probenahme - ALPAKA

generatio
Animal Trust Center
Heidelberg- Germany
www.generatio.com

EDTA-Blutprobe (nur durch vet. Fachpersonal)

Wichtige Hinweise:

1. *Für offiziell anerkannte Tests muss die Probenahme durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen.*
2. *Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation: Jeweils geltende Regelungen beachten.*

Fertiges EDTA-Blutröhrchen



👉 Beschriftetes Röhrchen mit EDTA-Blut bruchsicher in Transporthülse verpacken.

Probenversand vorbereiten

Drucker verfügbar?

Nein → **Online Bestellung aufgeben!** → **Und**

Ja → **Online-Bestellung?**

ATC-generiertes Einsendeformular ausdrucken.

Ja → **Ohne Onlineauftrag?**

Zutreffendes Blankoformular ausdrucken und ausfüllen.

Formloses Begleitschreiben erstellen:

- ☐ Tiername
- ☐ Tel. für Rückfragen
- ☐ Auftragsnummer der Onlinebestellung

Verpackung: Reisfester/wattierter Umschlag





☑

Versandanleitung

Generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt
support@generatio.com
+49 (0) 6221 389 353 0 Tel
+49 (0) 6221 389 353 1 Fax